

GIO perfect Ultrasonic Skin Scrubber

Dispositivo de peeling ultrasónico con EMS



MANUAL DE INSTRUCCIONES

Para evitar daños causados por un uso incorrecto, lea atentamente las instrucciones y utilice este producto siguiendo estrictamente las indicaciones del manual.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Nombre del producto: GIOperfect Ultrasonic Skin Scrubber with EMS Therapy
 Modelo del producto: GIO-730
 Dimensiones: 130x 70x 17 mm
 Peso: 75 g
 Voltaje de la batería: 3,7 V
 Potencia nominal: 1,5 W
 Capacidad de la batería: 250 mAh
 Frecuencia de la cuchilla: 26 000 vibraciones/segundo
 Tiempo de carga: aprox. 1-1,5 horas
 Tiempo de funcionamiento: aprox. 0,8 horas

CONTENIDO DEL PAQUETE

- 1 x Dispositivo
- 1 x cable de carga
- 1 x manual de usuario

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Las etiquetas de advertencia indican un peligro potencial. El incumplimiento de las instrucciones puede provocar lesiones o daños materiales.
- Deje de utilizarlo inmediatamente si experimenta dolor, molestias o reacciones anormales.
- Apague y desenchufe siempre el dispositivo antes de limpiarlo o realizar tareas de mantenimiento.
- Manténgalo fuera del alcance de los niños.
- No utilice el dispositivo cerca de sustancias inflamables (por ejemplo, alcohol, gasolina, acetona, aerosoles).
- No sumerja el producto en agua ni lo enjuague directamente bajo el grifo.
- Si el dispositivo se cae o se daña, no continúe utilizándolo.
- No desmonte ni intente reparar el dispositivo por su cuenta. Póngase en contacto con el punto de venta original para obtener ayuda.
- Utilice únicamente el cable de carga suministrado y asegúrese de que la fuente de alimentación cumple con las especificaciones del dispositivo.
- Limpie el dispositivo después de cada uso para evitar la acumulación de residuos.
- No utilice el dispositivo durante el baño o la ducha, ni cerca de bañeras, lavabos u otros recipientes con agua.

No apto para su uso por parte de:

- Personas embarazadas o menstruando, o personas con problemas cutáneos relacionados con las hormonas.
- Personas con alergias, enfermedades de la piel, dermatitis o quemaduras solares graves.
- Personas con heridas abiertas, eccema o hinchazón.
- Personas que se están recuperando de una cirugía.
- Personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, a menos que estén supervisadas por un tutor.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Una limpieza adecuada de la piel es esencial para la absorción del producto. Sin una limpieza profunda, los productos para el cuidado de la piel pueden no penetrar eficazmente en la piel, lo que provoca opacidad, acné, flacidez, manchas oscuras y otros problemas cutáneos. Este dispositivo utiliza vibraciones ultrasónicas de alta frecuencia y tecnología iónica para limpiar la piel en profundidad y mejorar la absorción de los productos para el cuidado de la piel.




MODO DE EMPLEO

PREPARACIÓN ANTES DEL USO

- Cargue el dispositivo durante 2 horas antes de utilizarlo por primera vez.
- Mantenga pulsado el botón de encendido durante 2 segundos para encenderlo o apagarlo. Pulse brevemente para cambiar de modo.
- Limpie la pala con un paño suave o un disco de algodón.
- Aplique un limpiador o agua limpia sobre la piel.
- Cuando la batería esté baja, el dispositivo emitirá dos pitidos y se apagará.
- Durante la carga, las luces indicadoras parpadearán una por una. Cuando esté completamente cargado, todas las luces permanecerán encendidas.


1. Limpieza ultrasónica

- Lávese la cara y aplique un limpiador facial.
- Pulse el primer modo para activar la limpieza por vibración.
- Sujete el dispositivo y mueva la lámina lentamente en un ángulo de 45° en dirección contraria a los poros.

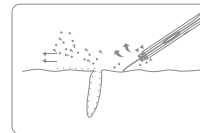

2. Desintoxicación EMS

- Limpie el rostro y aplique vapor durante 5 minutos (o coloque una toalla caliente).
- Aplique una solución para la eliminación de puntos negros durante 10 minutos.
- Presione el botón para activar el modo de exportación de iones positivos.
- Deslice la espátula lentamente hacia abajo, en dirección contraria a los poros.
- Utilice el dispositivo durante 10 minutos, luego enjuague el rostro y limpie el aparato.

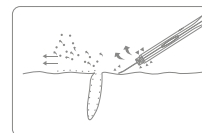


3. Infusión de nutrientes

- Limpie bien el rostro con agua y aplique vapor durante 5 minutos (o coloque una toalla caliente durante 5 minutos).
- Aplique una esencia rica en nutrientes sobre la piel.
- Presione el botón para activar el modo de infusión de nutrientes.
Deslice la espátula lentamente de abajo hacia arriba, siguiendo la dirección de los poros.
Continúe el tratamiento durante aproximadamente 5 minutos.
- Después de la sesión, enjuague el rostro con agua limpia.
Para ayudar a cerrar y calmar los poros, aplique vapor frío durante 10 minutos (o coloque una toalla fría).



PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA

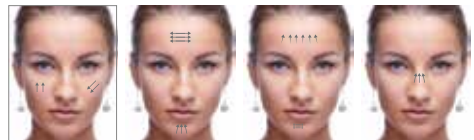

1. Céntrese en las zonas clave: frente, mandíbula y zona T (incluido el puente nasal).
2. Sujeta siempre la barra de contacto iónico situada en el lateral del dispositivo para activar las funciones iónicas.
3. Mantenga la pala en un ángulo de 45° y muévala lenta y suavemente por la piel, sin dejarla fija.
4. No utilizar sobre piel inflamada o irritada.
5. Uso recomendado: 2-3 veces por semana.
6. Limpie siempre el dispositivo y la pala antes y después de su uso.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Guarde el dispositivo en un lugar seco. No lo coloque en lavavajillas ni microondas.
- Apáguelo y desenchúfelo antes de limpiarlo.
- Utilice únicamente paños suaves humedecidos con agua fría o tibia; evite herramientas afiladas, agentes corrosivos o líquidos volátiles.
- No enjuague el dispositivo directamente bajo el agua.
- Si no se utiliza durante más de 3 meses, cargue completamente el dispositivo antes de guardarlo para evitar daños en la batería.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Posible causa	Solución
La pala no vibra	La pala está deformada	Sujete suavemente la pala con ambas manos y ajústela para que recupere su forma
	El cableado interno está desconectado	Póngase en contacto con el servicio posventa.
	Presión excesiva aplicada durante el uso	Aplique una presión ligera: toque suavemente la piel con la pala
	Batería baja	Cargue el dispositivo durante 2 horas como mínimo antes de utilizarlo
El dispositivo no se enciende	La batería está dañada debido a un largo periodo de inactividad.	Póngase en contacto con el servicio posventa.
	Ha entrado agua en el dispositivo.	Póngase en contacto con el servicio posventa.
	Ha entrado humedad en el botón de encendido	Póngase en contacto con el servicio posventa.
Fallo de la función de ionenes	Las manos del usuario no están en contacto con el electrodo lateral («barra de contacto»)	Asegúrese de que su mano esté en contacto con el electrodo lateral durante el uso
	Circuito interno dañado por la entrada de agua	Póngase en contacto con el servicio posventa.

Scan the QR code to download the manual
Zeskanuj kod QR, aby pobrać instrukcję
Scannen Sie den QR-Code, um das Handbuch herunterzuladen
Scannez le code QR pour télécharger le manuel
Escanee el código QR para descargar el manual
Digitalize o código QR para descarregar o manual
Scansiona il codice QR per scaricare il manuale
Scan de QR-code om de handleiding te downloaden
Скануйте QR-код, щоб завантажити інструкцію
Naskenujte QR kód a stáhněte si návod k použití
Naskenujte QR kód a stiahnite si príručku
Scanează codul QR pentru a descărca manualul
Nuskaitykite QR kodą, kad atsisiųstumėte instrukciją
Nolasiet QR kodu, lai lejupielādētu rokasgrāmatu
Lae juhend alla, skannides QR-koodi
A kézikönyv letöltéséhez olvassa be a QR-kódot.
ليدلدا ليؤننننل قعيؤسلا قباؤنننننل نؤر ؤسؤا



innoGLO

Fabricado en China para
INNOGIO GLOBAL sp. z o.o.
Ostródzka 74H, 03-289 Varsovia, Polonia
www.innogio.es

@innoGLO.official @innogio_com

